

# RIGISCAN® PLUS

Sistema di Valutazione della Rigidità Peniena

## Un Efficace Strumento per l'Analisi, l'Educazione e la Documentazione della Disfunzione Erettile

Quando i pazienti si rivolgono a voi con preoccupazioni riguardo alla disfunzione erettile, cercano risposte e trattamenti. Il Sistema di Valutazione della Rigidità RigiScan® Plus di GOTOP Medical ha la capacità di raccogliere, valutare e archiviare i dati sulla rigidità e la tumescenza del pene dei vostri pazienti... e fornire le risposte che li faranno sentire a proprio agio dalla diagnosi al trattamento.

### Portabilità e Affidabilità

Il RigiScan Plus fornisce risultati affidabili e misura l'attività complessiva documentando la frequenza, la rigidità e la durata delle erezioni notturne e provocate. Il dispositivo è autosestante e facile da utilizzare.

Il Sistema RigiScan Plus è presentato in un astuccio per garantire privacy e comodità ai vostri pazienti.

Il RigiScan è progettato per semplificare la diagnosi della disfunzione erettile attraverso:

- La possibilità di differenziare tra impotenza ORGANICA e PSICOGENA.
- La facilità di conversione in dati tabulari per un'analisi migliorata e l'educazione del paziente.
- La fornitura di una valutazione grafica e documentazione della funzione erettile

### Capacità Diagnostiche Aggiuntive

Oltre a diagnosticare la disfunzione erettile, il RigiScan Plus può essere utilizzato per monitorare l'efficacia degli agenti farmacologici e consentire un dosaggio più preciso



ALEF

Via Novara 139  
20153, Milano (MI)  
Mail: [info@alef-online.net](mailto:info@alef-online.net)  
Tel. 02 45395260

**GOTOP**  
MEDICAL


# RIGISCAN® PLUS

Sistema di Valutazione della Rigidità Peniena


I download del software basato su Windows® consentono di scaricare fino a 30 ore di test in meno di 10 minuti!

- Un database integrato consente una facile gestione dei file dei pazienti.
- L'educazione migliorata per pazienti/medici tramite una vasta gamma di report, grafici e tabelle.

Session:	Date:	Start:	Stop:	Total:	Number of Events	Base line Tum.	Avg Evnt Rig	Sustained Erectile Activity RAU	TAU	Tip Base
0	09/04/84	01:12 p.m.	11:09 p.m.	0:30		6.0				
1	09/04/84	10:43 p.m.	06:05 a.m.	7:23	4	5.8	35	30	23	Tip Base
2	09/05/84	10:40 p.m.	06:01 a.m.	7:21	7	5.7	33	27	16	Tip Base
3	09/06/84	10:40 p.m.	05:48 a.m.	7:09	5	5.8	44	24	14	Tip Base

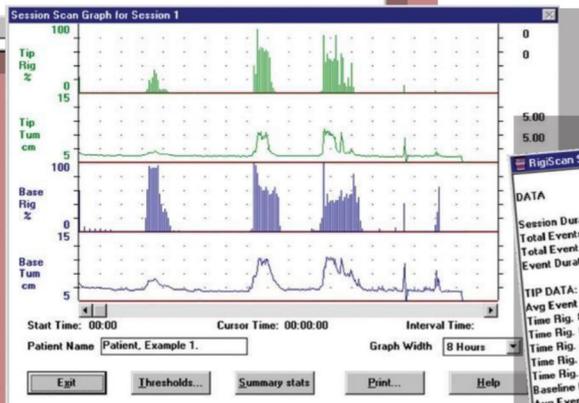

	ALL	SES1	SES2	SES3
DATA				
Session Duration	21:54:15	07:23:30	07:21:45	07:09:00
Total Events	16	4	7	5
Total Event Duration	03:47:45	01:27:00	01:25:30	00:55:15
Event Duration(% Of Session)	17	20	19	13
TIP DATA:				
Avg Event Rigidity(%)	36	35	33	44
Time Rig. 60-100% (mins)	00:31:00	00:06:00	00:09:30	00:15:30
Time Rig. 60-75% (mins)	00:31:00	00:10:00	00:16:30	00:04:30
Time Rig. 40-55% (mins)	00:43:00	00:24:30	00:09:30	00:09:30
Time Rig. 20-35% (mins)	00:22:30	00:11:30	00:05:30	00:29:00
Time Rig. 0-15% (mins)	01:38:30	00:34:30	00:44:00	5.8
Baseline Circumference (cm)	5.8	5.7	6.8	7.3
Avg Event Tum (cm)	5.8	7.3	6.8	7.3
Evt Tum % Bline(%)	7.1	26	19	26
SUSTAINED ERECTILE ACTIVITY:				
Rigidity Activity Units (RAU)	27	30	27	24
Tumescence Activity Units (TAU)	18	23	16	14

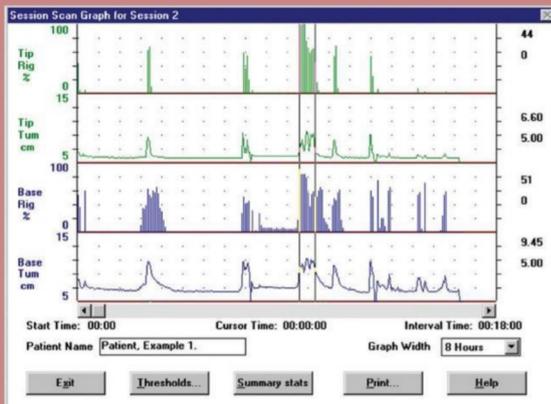

ALEF

Via Novara 139  
20153, Milano (MI)  
Mail: [info@alef-online.net](mailto:info@alef-online.net)  
Tel. 02 45395260

GOTOP  
MEDICAL

GOTOP Medical, Inc.,  
1000 Westgate Drive, Suite 125,  
St. Paul, MN 55114 U.S.A.

[www.gotopmedical.com](http://www.gotopmedical.com)

P 651.641.3621  
F 651.641.3622